



# Käyttöohje

**Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy**

Sirrikuja 3 L                      Puh: 040 777 1320                      Sähköposti: info@lowvision.fi  
00940 Helsinki                      Fax: 09 6898 8342                      Internet: www.lowvision.fi

**Valmistaja: LVI Low Vision International**

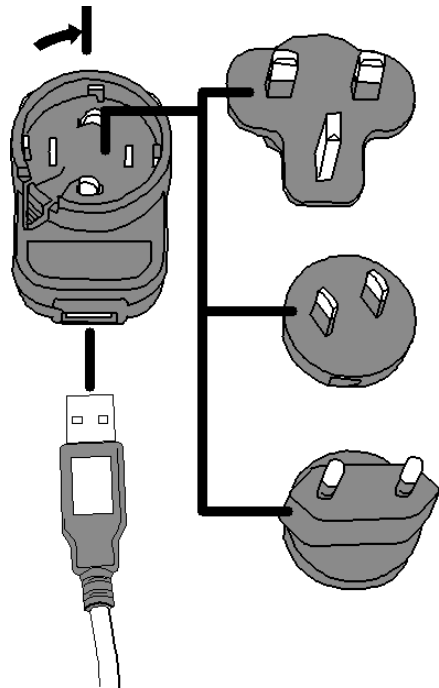
Verkstadsgatan 5      Puh: 0046 470 72 77 00      Sähköposti: info@lvi.se  
SE-35246 Växjö      Fax: 0046 470 72 77 25      Internet: www.lvi.se

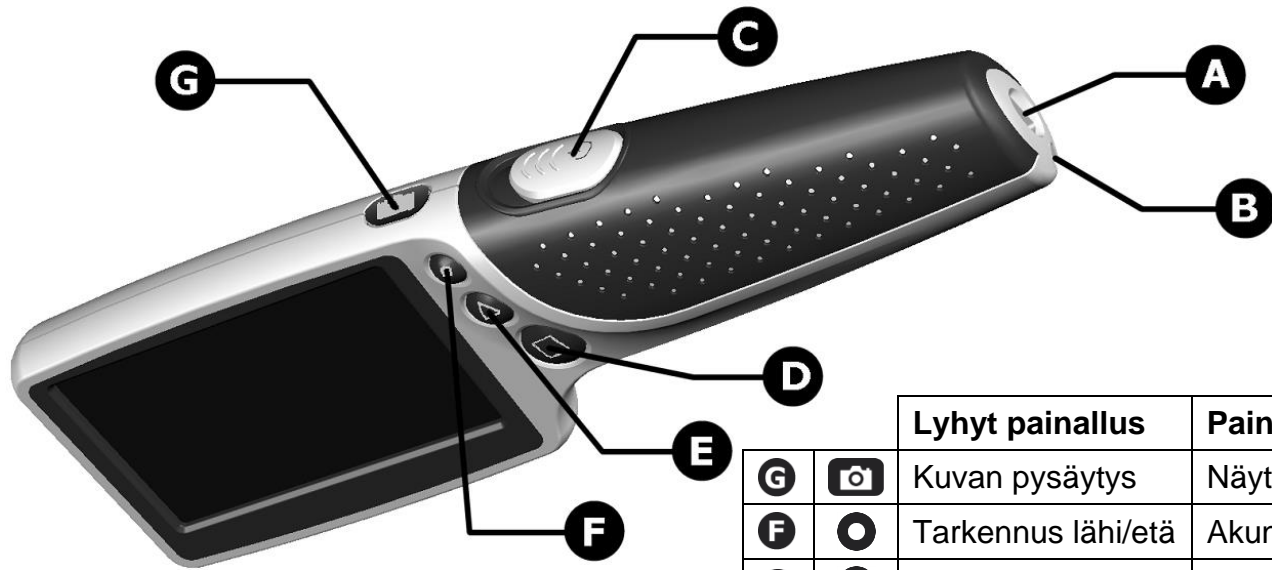
## Käyttöönotto





Suosittellemme MagniLink Visus suurennuslaitteen täyteen lataamista ennen sen ensimmäistä käyttökertaa. Laturin mukana toimitetaan eri maissa käytettäviä pistokevaihtoehtoja. Valitse niistä oikea ja aseta se laturiin kuvan osoittamalla tavalla. Kierrä pistoketta niin että se naksahtaa paikoilleen.

Liitä virtajohdon toinen pää laturiin ja toinen pää laitteen kädensijaan (A). Laturin latausvalo palaa punaisena kun laite latautuu ja sammuu kun laite on latautunut. Täyteen varaustilaan latautuminen kestää noin kolme tuntia.

Laitteen mukana toimitetaan kaulanauha, joka voidaan tarvittaessa kiinnittää kädensijaan (B).






		<b>Lyhyt painallus</b>	<b>Paina 3sekuntia</b>
<b>G</b>		Kuvan pysäytys	Näytön kirkkaus
<b>F</b>		Tarkennus lähi/etä	Akun varaustila
<b>E</b>		Kuvatila	Vaihda keinoväritila
<b>D</b>		Suurennustaso	Valaistus päällä/pois


## kytkeminen päälle ja pois

Työnnä virtakytkintä (C) eteenpäin kytkeäksesi laite päälle. Laitteen alapuolella olevat LED valot syttyvät ja kuva ilmestyy näyttöön. Aseta laitteen keskikohta suurennettavan alueen päälle. Nosta tai laske laitetta löytääksesi terävimmän tarkennuksen.

## Suurennus


Painamalla toistuvasti  painiketta (D) voit vaihtaa kolmen eri suurennustason välillä. Valitse paras suurennustaso tarkastelemastasi kohteesta.

## Kuvatila

Painamalla toistuvasti  painiketta (E) voit vaihtaa eri kuvatilojen välillä: luonnolliset värit, valkoinen mustalla, musta valkoisella sekä puoliväritila.. Valitse paras kuvatila tarkastelemastasi kohteesta.

Kun käynnistät laitteen uudelleen, muistaa se viimeiseksi käytetyn suurennustason, kuvatilan ja tarkennusasetuksen.

## Tarkennus


Kun haluat paikallistaa tietyn kohdan laajemmasta alueesta, paina  painiketta (F), jolloin tarkennusetäisyys suurenee ja voit nostaa laitteen etäämmälle kohteesta ja nähdä suuremman yleiskuvan. Paina painiketta uudelleen palataksesi normaaliin lähitarkennustilaan.

## Tukijalka


MagniLink Visus suurennuslaitteen alaosassa linssin ympärillä on aukikäännettävä tukijalka. Käännä se auki ja tue se tarkasteltavaa kohdetta vasten, jolloin paras tarkennusetäisyys on helpompi säilyttää. Käännä tukijalka kiinni kun sitä ei tarvita.




## Kuvan pysäytys

Laitteessa on kuvanpysäytystoiminto, joka on hyödyllinen esimerkiksi silloin kun tarkasteltava kohde on hankalasti saavutettavassa paikassa tai silloin kun kiinteän kohteen tietoja on tarkasteltava muualla. Paina  painiketta (G) pysäyttääksesi kuva näytölle. Paina painiketta uudelleen palataksesi perustilaan. Pysäytyskuvaa ei voi tallentaa eikä siirtää toiseen laitteeseen.


## Valaistus

Taustavalaistujen kohteiden kuten esim. matkapuhelimen ja tietokoneen näytön tarkastelua voidaan helpottaa kytkemällä laitteen valaistus pois päältä. Paina  painiketta kolmen sekunnin ajan sammuttaaksesi valot. Kytke valot takaisin painamalla painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan tai kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle.


## Keinoväritilan vaihtaminen

Voit valita halutessasi erilaisten keinoväritilojen välillä. Paina  painiketta kolmen sekunnin ajan ja näytön keskelle ilmestyy tilaa osoittava merkki. Paina painiketta uudelleen toistuvasti selataksesi eri keinovärien välillä. Kun olet löytänyt sopivimman keinovärin, paina painiketta jälleen kolmen sekunnin ajan tallentaaksesi haluamasi keinovärin.

## Akun varaustason ilmaisin

Paina  painiketta 3 sekunnin ajan ja näytölle ilmestyy akun varaustasoa osoittava merkki. Mikäli akun varaustaso on erittäin alhainen, ilmestyy merkki automaattisesti näytön keskelle.

## Näytön kirkkauden säätäminen

Paina  painiketta kolmen sekunnin ajan vaihtaaksesi näytön kirkkautta. Valittavanasi on kolme eri kirkkaustasoa: 100%, 75% ja 50%. Laite muistaa viimeksi käytetyn kirkkaustason kun se käynnistetään uudelleen.



## **Automaattinen virrankatkaisu**

Jos laitetta ei liikuteta kolmeen minuuttiin, se siirtyy energiansäästötilaan ja näyttö sammuu. Kun laitetta liikutetaan uudelleen palautuu se takaisin normaaliin toimintatilaan. Mikäli laitetta ei liikuteta kahdeksaan minuuttiin, se kytkeytyy pois päältä.

Jos akku tyhjenee, MagniLink Visus kytkeytyy automaattisesti pois päältä eikä käynnisty ennen kuin akku on ladattu.

## **Vaihtoehtoinen akun lataaminen**

MagniLink Visus voidaan ladata myös tietokoneen USB portin kautta tai muilla kannettavien laitteiden standardilatureilla. Käytetty liitäntä on standardi ja se on yhteensopiva tällaisten laturien kanssa vaikka latausajat voivatkin vaihdella.

## **Ylläpito**

Älä käytä saippuaa tai muita liuottavia aineita laitteen puhdistamiseen. Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Käytä sormenjälkien ja muiden epäpuhtauksien puhdistamiseen mukana toimitettua pyyhintä. Vaikeasti irtoavan lian poistamiseen voit käyttää kosteaa kangasta..

Älä avaa laitetta. Sen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

MagniLink Visus suurennuslaitteen LED valot ovat hyvin kirkkaita. Älä katso valoihin pitkään yhtäjaksoisesti.

Käyttöiän lopussa MagniLink Visus on toimitettava hyväksytyyn kierrätyspisteeseen.

## Tekniset tiedot

	<b>MagniLink Visus 3,4” malli (MLVISUS3,4)</b>
<b>Laturi</b>	100V – 240Vac 50/60Hz sisältää adapterin
<b>Laitteen virransyöttö</b>	5V dc, micro-USB liitäntä
<b>Näyttö</b>	3.4”-AMOLED 16:9
<b>Käyttölämpötila</b>	0°C to 45°C
<b>Latausaika</b>	3 tuntia vakiolaturilla
<b>Käyttöaika</b> <i>Riippuen käytettävästä kuvatilasta ja asetuksista.</i>	2 tuntia positiivitulassa 4 tuntia negatiivitulassa
<b>Paino</b>	168g
<b>Suurennus(lähitila) (etätila)</b>	2.8X, 4.5X ja 5.5X 1.3x, 2x ja 2.5x

## Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

