



# Manuel d'utilisation

**Distributeur en Belgique : LVI België NV**

Grauwmeer 1/42 bus 40  
3001 Leuven

Tél: 03 455 92 64,  
Télé: 03 455 92 88,

Courriel: [info@lvi.be](mailto:info@lvi.be)  
Internet: [www.lvi.be](http://www.lvi.be)

**LVI Low Vision International GmbH**

Hinterbrunnenstrasse 1  
CH-8312 Winterberg

Tel. 052 202 96 16  
Fax: 052 202 96 15

E-mail: [info@lvi.ch](mailto:info@lvi.ch)  
Internet: [www.lvi.ch](http://www.lvi.ch)

**Fabricant : LVI Low Vision International**

Verkstadsgratan 5  
352 46 Växjö

Tel : +46 470 – 727700  
Fax : +46 470 – 727725


E-mail : [info@lvi.se](mailto:info@lvi.se)  
Internet : [www.lvi.se](http://www.lvi.se)


## Première opération

Nous vous recommandons de charger complètement votre loupe MagniLink Visus avant la première utilisation. Le chargeur est fourni avec une gamme d'adaptateurs et vous devez choisir celui qui convient à votre pays. Placez le comme indiqué sur l'image et faites une rotation jusqu'à entendre un clic.

Placez le câble dans le chargeur et l'autre partie dans le connecteur du MagniLink Visus (A). Une diode rouge s'allumera le temps de la charge de l'appareil. Dès celle-ci terminée, la diode va s'éteindre. La charge dure environ trois heures.

Une dragonne est également livrée avec l'appareil. Vous pouvez la fixer à l'emplacement (B) au besoin.

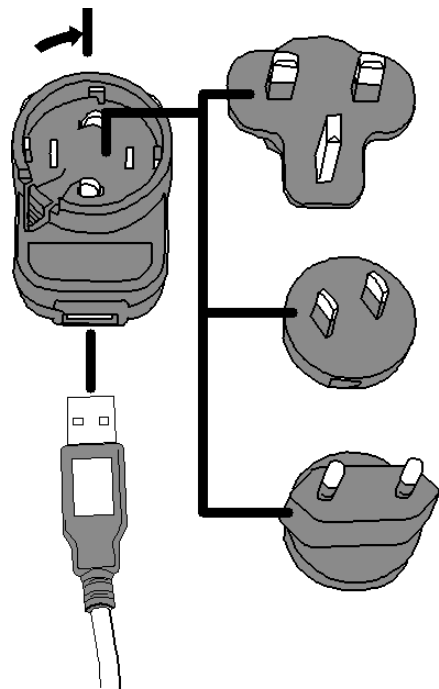

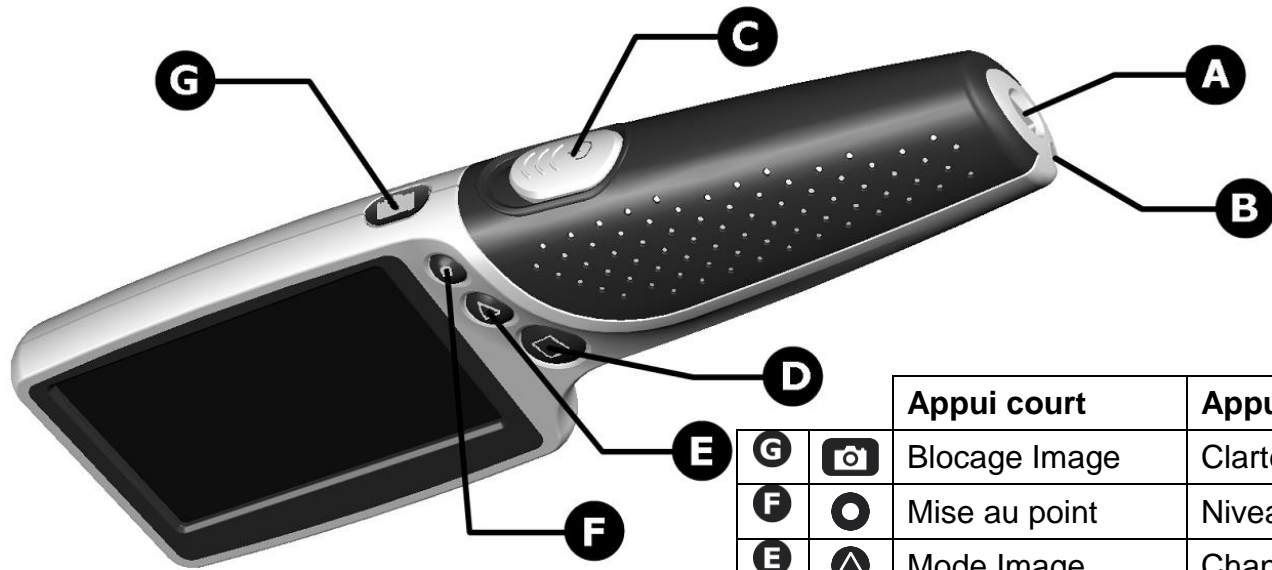

		Appui court	Appui 3 secondes
G		Blocage Image	Clarté écran
F		Mise au point	Niveau de Batterie
E		Mode Image	Changer les couleurs
D		Niveau Agrandissement	Illumination on/off


## **Allumage**

Déplacez le curseur (C) vers l'avant. L'éclairage en dessus de l'appareil va s'allumer et l'image apparait à l'écran. Placez la loupe au dessus de la zone à voir et le centre sur la partie à agrandir. Il faudra éloigner ou rapprocher la loupe pour avoir une image nette.

## **Agrandissement**



En appuyant plusieurs fois sur le bouton  (D) vous pourrez parcourir les trois niveaux d'agrandissement. Il vous suffit de choisir celui qui vous convient pour votre vision.

## **Mode Image**

En appuyant plusieurs fois sur le bouton (E)  vous pourrez choisir un mode d'image parmi: couleur naturelles, blanc sur noir ou noir sur blanc, ou mi-teinte. Choisissez le mode qui convient à votre vision.

L'appareil, au rallumage, aura retenu le niveau d'agrandissement et le mode Image que vous aurez choisi.

### **Bouton de mise au point**

Il arrive que vous souhaitez voir un point précis sur une page. Le bouton (F)  vous permet de modifier la distance de mise au point afin de pouvoir élargir le champ de vision. En pressant à nouveau le bouton , vous revenez à une mise au point rapprochée pour voir clairement votre cible.

### **Bras stabilisateur**

Le MagniLink Visus est équipé d'un bras stabilisateur que vous pouvez déplier, se trouvant en dessous, autour de la lentille. Dépliez le pour pouvoir poser votre appareil sur la page et ainsi gagner en stabilité.


### **Blocage Image**

Lorsque vous avez des endroits difficiles d'accès, comme un prix en rayon, vous pouvez photographier cet endroit et le porter à vos






yeux par la suite. Appuyez sur le bouton (G)  et l'image se bloque; un nouvel appui sur le bouton retourne au mode caméra. La photographie ne peut pas être enregistrée ni exportée.


### **Illumination**

Vous pouvez arrêter l'éclairage de la loupe afin de lire plus facilement des appareils rétro éclairés (gsm, écran d'ordinateur). Appuyez sur le bouton  pendant trois seconde pour éteindre l'éclairage. Un nouvel appui de trois seconde rallume l'éclairage?


### **Changer les demi-teinte**

Vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez pour les mode Image contrasté. Vous devez d'abord choisir ce mode image sur le MagniLink Visus. Appuyez sur le bouton  pendant trois secondes jusqu'à l'apparition d'un indicateur au centre de l'image. Appuyez à nouveau sur le bouton  pour choisir les options. Lorsque votre choix est fait, appuyez à nouveau sur le bouton  pendant trois secondes pour enregistrer vos préférences.

## Niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton  pendant trois secondes et vous verrez le niveau de charge restante de votre batterie. Si la batterie est presque déchargée, cet indicateur apparaîtra automatiquement sur l'écran.

## Changer la luminosité de l'écran

Appuyez sur le bouton  pendant trois secondes pour changer la luminosité de l'écran. Il y a trois options: 100%, 75% et 50%. Le MagniLink Visus retiendra le dernier niveau demandé lors d'un prochain rallumage.

## Coupure automatique

L'appareil est pourvu d'un système à économie d'énergie. S'il n'y a aucun mouvement pendant trois minutes, l'appareil va se couper automatiquement. L'écran et l'éclairage vont s'éteindre. En cas de mouvements détectés, le tout va se rallumer. Au bout de 8 minutes d'inactivité, l'appareil va se couper complètement. Il faudra dès lors le rallumer avec l'interrupteur.

Si la batterie est déchargée, l'appareil ne se rallumera que lorsqu'il sera en charge.



### **Charge alternative**

L'appareil MagniLink Visus peut se recharger via un port USB d'ordinateur ou tout type de chargeur d'appareil usuel au standard mini USB. Ce standard est connu de l'industrie mais les temps de charge peuvent varier d'un chargeur à l'autre.

### **Instructions de précautions**

Lorsque vous désirez nettoyer l'appareil n'utilisez pas de produits solvants ou abrasifs. Ne le plongez pas dans l'eau! Utilisez le tissu livré avec l'appareil. En cas de saletés tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide.

N'ouvrez pas l'appareil.

L'éclairage LED est particulièrement puissant. Ne vous exposez pas à cet éclairage trop longtemps.

A la fin de vie de l'appareil, portez le dans un centre de recyclage. Ne le brûlez pas.

## Technical Data

	<b>MagniLink Visus 3,4</b> (MLVISUS3,4)
<b>Charger Supply</b>	100V – 240Vac 50/60Hz with supplied adaptor
<b>Unit supply voltage</b>	5V dc, micro-USB connector
<b>Display</b>	3.4"-diagonal AMOLED 16:9
<b>Operating temperature</b>	0°C to 45°C
<b>Recharging time</b>	3 hours with supplied charger
<b>Run time</b> <i>Dependant on mode of operation and subject matter.</i>	From 2 hours in positive mode up to over 4 hours in negative.
<b>Weight</b>	168g
<b>Magnification (near setting)</b> <b>(far setting)</b>	2.8X, 4.5X and 5.5X 1.3x, 2x and 2.5x

Specification is preliminary and is subject to change

## Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

