



Gebruikershandleiding

Distributeur Belgieum : LVI België NV

Grauwmeer 1/42 bus 40
3001 Leuven

Tel: 03 455 92 64 E-mail: info@lvi.be
Fax: 03 455 92 88 Internet: www.lvi.be

Distributeur Nederland: Babbage Automation

Beverenlaan 1
4706 VM Roosendaal

Tel: 0165-53 61 56 E-mail: info@babbage.com
Fax: 0165-544040 Internet: www.babbage.com

Producent: LVI Low Vision International

Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö


Tel: +46 470-727700 E-mail: info@lvi.se
Fax: +46 470- 727725 nternet: www.lvi.se


Ingebruikneming

Wij raden u aan om uw MagniLink Visus loep volledig op te laden alvorens hem te gaan gebruiken. Het laadapparaat wordt geleverd met een stekker met verschillende internationale aansluitpennen, kies de pennen die geschikt zijn voor uw land. Plaats de pennen zoals hiernaast aangegeven en draai ze tot ze in hun positie klikken.

Sluit de kabel aan op het laadapparaat en steek hem in het uiteinde van de handgreep van de MagniLink Visus (A). Tijdens het opladen van de MagniLink Visus geeft de laadindicator rondom de stekker rood licht. Dit dooft zodra het opladen is voltooid. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur.

Het apparaat is voorzien van een halskoord dat u desgewenst aan het uiteinde van de handgreep (B) kunt bevestigen.

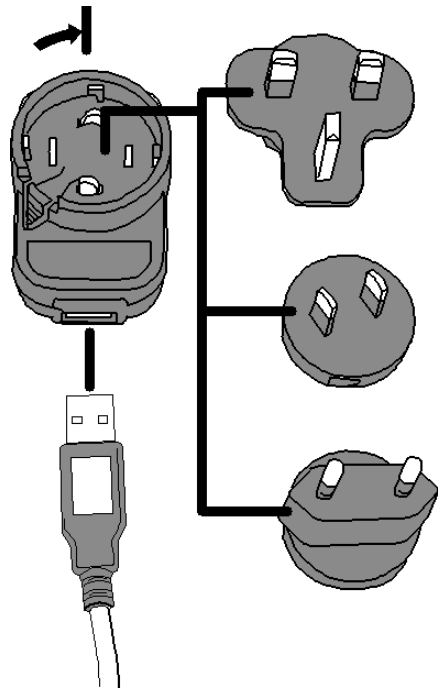

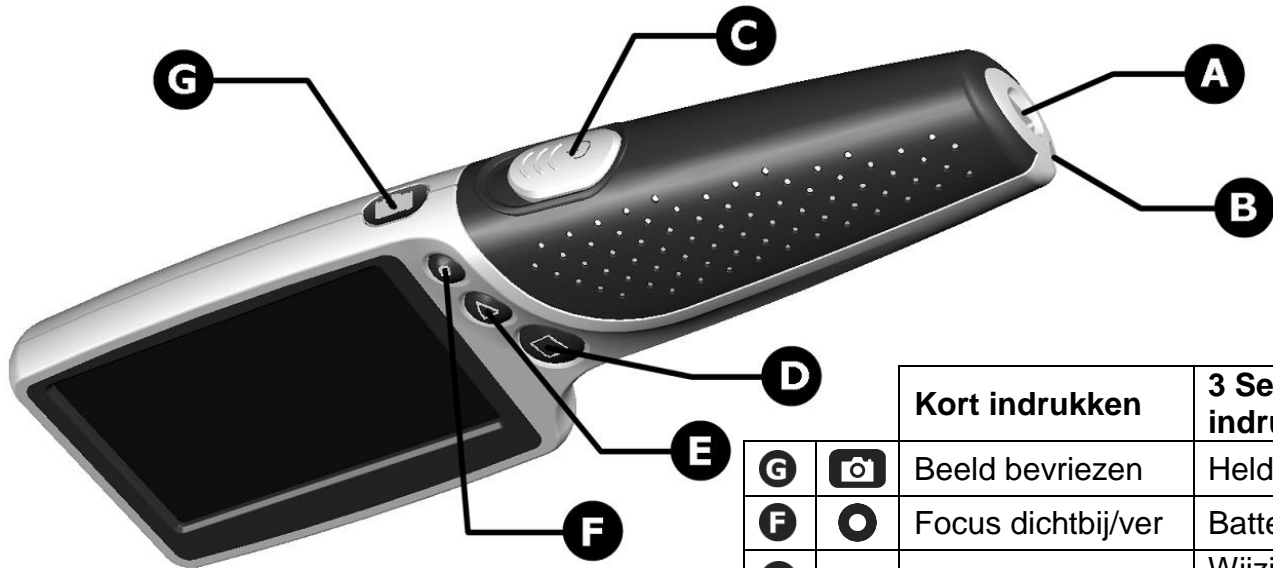


| | | Kort indrukken | 3 Seconden indrukken |
|----------|--|--------------------|----------------------------|
| G | | Beeld bevroren | Helderheid scherm |
| F | | Focus dichtbij/ver | Batterijlading |
| E | | Beeldmodus | Wijzigen kunstmatige kleur |
| D | | Vergroting | Verlichting aan/uit |


Aan/uitschakelen

Schuif de aan/uitschakelaar (C) vooruit om het apparaat aan te zetten. De LED-lampjes op de onderzijde gaan branden en er verschijnt een beeld op het scherm. Plaats het apparaat over het object dat u wilt vergroten, met het scherm centraal boven de zone die u wilt bekijken. Om het beeld goed scherp te krijgen beweegt u het apparaat naar boven of naar beneden.

Vergroting

Door enkele keren op de knop  (D) te drukken, kunt u kiezen uit drie niveaus van vergroting. U kiest het niveau dat het meest geschikt is voor de grootte van de tekst die u bekijkt.

Beeldmodus

Door enkele keren op de knop  (E) te drukken, kunt u kiezen uit verschillende beeldmodi: natuurlijke kleur, wit/zwart, zwart/wit en kunstmatige kleur. U kiest de modus die u het beste beeld geeft, afhankelijk van wat u bekijkt.

De MagniLink Visus zal de volgende keer dat u hem aanzet, de laatste instellingen van vergroting, beeldmodus en focusinstelling gebruiken.

Focus-knop


Soms zult u op een pagina een specifieke zone willen opzoeken om nader te bekijken. Met de knop  (F) kunt u de focus van de lens op een grotere afstand instellen zodat u het apparaat verder van de pagina kunt houden om een groter oppervlak te bekijken. Als u nogmaals op de knop  drukt, keert u terug naar de dichtbij-instelling van de focus.

Steun


De MagniLink Visus is voorzien van een uitklapbare steun die zich op de onderzijde rondom de lens bevindt. U kunt deze eenvoudig uitklappen om de ideale afstand tot het object dat u bekijkt te handhaven. Als u de steun niet gebruikt, klikt u hem terug op zijn plaats.





Beeld bevroren


De MagniLink Visus kan een beeld "bevroren". Dit kan van pas komen op moeilijk bereikbare plaatsen of als u een telefoonnummer hebt gevonden en daarmee naar de telefoon wilt lopen. Als u op de knop  (G) drukt, blijft het beeld op het scherm staan tot u nogmaals op deze knop drukt. Het bevroren beeld wordt niet opgeslagen en kan niet uit het apparaat worden afgelezen.

Verlichting


Om objecten met ingebouwde verlichting te bekijken zoals een mobiele telefoon of een computerscherm, kan de verlichting van het apparaat worden uitgeschakeld. Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt om de verlichting uit te schakelen. Herhaal dit om de verlichting weer aan te zetten of schakel het apparaat uit en weer aan.

Wijzigen kunstmatige kleur


U kunt desgewenst kiezen uit een aantal kunstmatige kleurcombinaties. Daarvoor kiest u eerst de "kunstmatige kleur" beeldmodus. Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt tot in het midden van het scherm een indicator verschijnt. Druk op de knop  om door de opties te scrollen. Als u

een keuze hebt gemaakt drukt u op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt om uw voorkeur op te slaan.

Laadniveau van de batterij

Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt; op het scherm verschijnt een indicator die de resterende lading van de batterij aangeeft. Als de batterij bijna leeg is, zal deze indicator automatisch op het scherm verschijnen.

Veranderen van de helderheid van het scherm

Druk op de knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt. De helderheid van het scherm zal nu veranderen. Er zijn drie instellingen: 100%, 75% en 50%. Het apparaat onthoudt de laatste instelling en handhaaft deze als het opnieuw wordt aangezet.

Automatisch uitschakelen

Als drie minuten naar hetzelfde beeld wordt gekeken, zal de MagniLink Visus overschakelen op een lager stroomverbruik. Het scherm wordt zwart en de verlichting wordt uitgeschakeld. Zodra een beweging wordt waargenomen, wordt het apparaat automatisch geactiveerd. Als gedurende 8 minuten geen

beweging wordt waargenomen, wordt het apparaat volledig uitgeschakeld en moet op een knop worden gedrukt om het te activeren.

Als de batterij leeg is, zal de MagniLink Visus zichzelf uitschakelen en pas worden geactiveerd nadat hij is opgeladen.

Verschillende manieren van opladen

De MagniLink Visus kan worden opgeladen via de USB-poort van een computer of via een groot aantal standaardlaadapparaten voor mobiele apparaten. De aansluiting voldoet aan de industriële norm en alle laadapparaten van dit type zijn hiermee compatibel, al zullen de laadtijden verschillen.

Onderhoudsinstructies en waarschuwingen

Gebruik voor het schoonmaken van de MagniLink Visus geen zeepoplossingen, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Dompel hem niet in water! Gebruik het meegeleverde doekje voor het verwijderen van vingerafdrukken etc. Ander vuil kan worden verwijderd met een vochtig doekje.

Maak de MagniLink Visus niet open – het apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden.

De LED-verlichting in de MagniLink Visus is zeer krachtig. Kijk niet gedurende langere tijd in de LED-verlichting.

Aan het eind van zijn levensduur dient de MagniLink Visus te worden gerecycled via een gecertificeerd afvalverwerkingsstation. Niet verbranden.

Technische gegevens

| | MagniLink Visus 3,4 (MLVISUS3,4) |
|---|---|
| Voeding laadapparaat | 100V – 240Vac 50/60Hz met meegeleverde adapter |
| Voedingsspanning van het apparaat | 5V gelijkstroom, micro-USB connector |
| Scherm | 3.4"-diagonaal AMOLED 16:9 |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C - 45°C |
| Oplaadtijd | 3 uur met meegeleverd laadapparaat |
| Gebruiksduur <i>Afhankelijk van de gebruikte modus en toepassing.</i> | Van 2 uur in positieve modus tot meer dan 4 uur in negatieve modus. |
| Gewicht | 168g |
| Vergroting (instelling dichtbij) (instelling veraf) | 2,8X, 4,5X en 5,5X 1,3x, 2x en 2,5x |

Deze opgave is voorlopig en kan worden gewijzigd

Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

