



Bedienungsanleitung

Deutschland - LVI Deutschland GmbH

Bahnhofsplatz 1

Tel: 04171 – 6693844

E-mail: info@lvideutschland.de

21423 Winsen (Luhe)

Fax: 04171 – 6693845

Internet: www.lvideutschland.de**Schweiz - LVI Low Vision International GmbH**

Hinterbrunnenstrasse 1

Tel. 052 202 96 16

E-mail: info@lvi.ch

CH-8312 Winterberg

Fax: 052 202 96 15

Internet: www.lvi.ch**Schweden - LVI Low Vision International**

Verkstadsgatan 5

Tel.: +46 470 – 727700

E-Mail: info@lvi.se

352 46 Växjö

Fax: +46 470 – 727725

Internet: www.lvi.se

MagniLink Visus bedienungsanleitung 7942144a


MagniLink Visus Bedienungsanleitung


Erste Inbetriebnahme

Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihre MagniLink Visus Leselupe vollständig aufladen, bevor Sie diese zum ersten Mal benutzen. Das Ladegerät wird geliefert mit einigen zusätzlichen Steckern, und Sie sollten den passenden für Ihr Land auswählen. Stecken Sie ihn auf, wie es auf der Abbildung gezeigt wird und drehen Sie ihn, bis er einrastet.

Verbinden Sie das Kabel mit dem Ladegerät und stecken Sie es an das Ende des Griffs des MagniLink Visus (A). Das Ladelicht am Stecker wird rot aufleuchten wenn der MagniLink Visus geladen wird und wird nicht mehr aufleuchten, wenn das Gerät komplett geladen ist. Es dauert ungefähr drei Stunden, das Gerät komplett aufzuladen.

Das Gerät wird mit einem Band für den Hals geliefert, dass am Griff festgemacht werden kann, falls nötig (B).

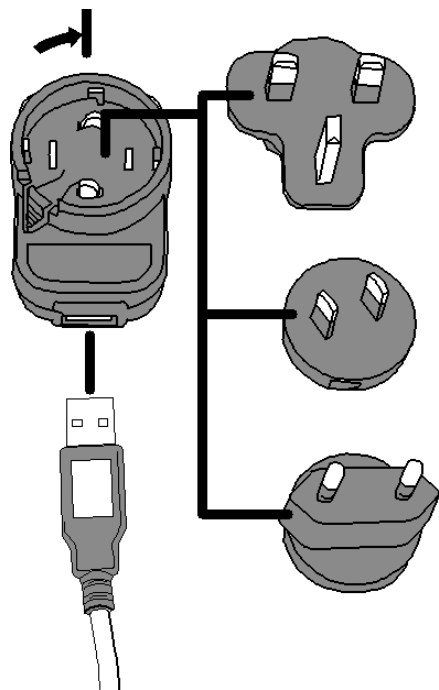

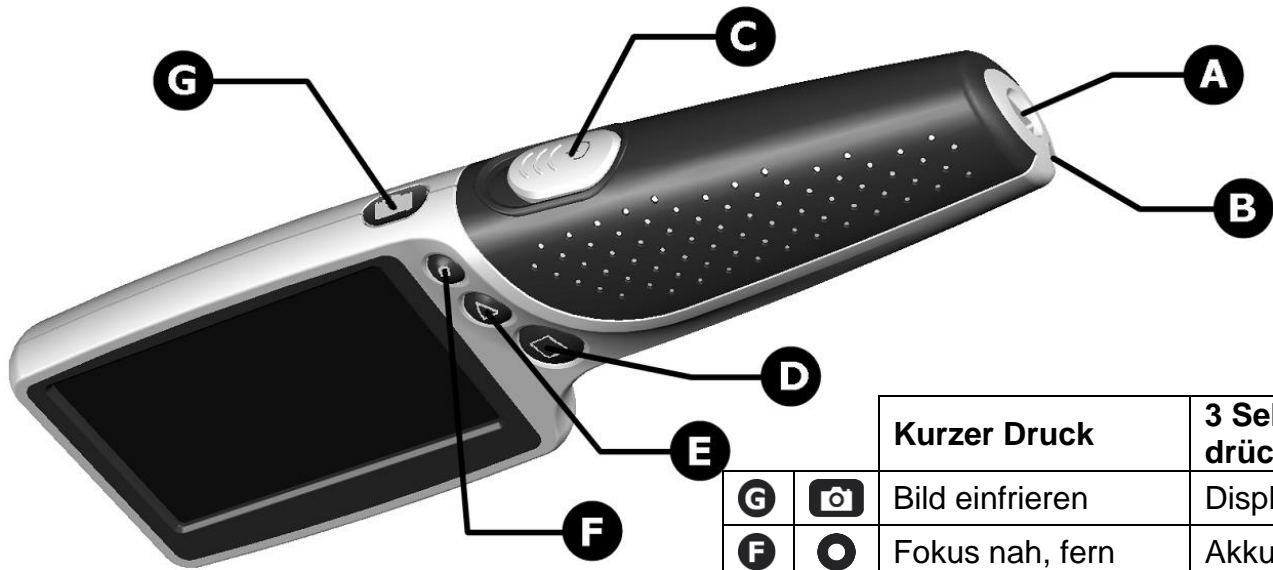


| | | Kurzer Druck | 3 Sekunden drücken |
|----------|--|--------------------|--------------------|
| G | | Bild einfrieren | Display Helligkeit |
| F | | Fokus nah, fern | Akkustand |
| E | | Bildmodus | Farbmodus ändern |
| D | | Vergrößerungsstufe | Beleuchtung an/aus |


An- und ausschalten

Bewegen Sie die Anschalttaste (C) nach vorne, um das Gerät anzuschalten. Die LED Lichter an der Unterseite werden aufleuchten und ein Bild wird auf dem Display erscheinen. Platzieren Sie das Gerät auf dem Gegenstand, den Sie vergrößern möchten, mit dem Display im Zentrum. Sie werden das Gerät anheben oder senken müssen, um den schärfsten Fokus zu erhalten.

Vergrößerung



Das wiederholte Drücken der  Taste (D) wird Sie durch die drei Vergrößerungsstufen führen. Sie können die Stufe auswählen, die für Sie am geeignetsten ist, um den Text zu lesen, den Sie ausgewählt haben.

Bildmodus

Mehrfaches Drücken der  Taste (E) wird Sie durch die verschiedenen Farben führen: Echtfarbe, weiß auf schwarz, schwarz auf weiß und Falschfarben. Sie sollten den Modus auswählen, der Ihnen das beste Bild gibt.

Das MagniLink Visus Gerät wird die letzte Vergrößerung, den Bildmodus und die Fokuseinstellungen wiederverwenden, wenn es wieder angeschaltet wird.

Fokustaste

Manchmal möchten Sie einen bestimmten Ausschnitt auf einer Seite finden. Die  Taste (F) wird den Fokus der Linse auf eine größere Distanz setzen und Ihnen ermöglichen, das Gerät von der Seite zu heben um einen größeren Blickwinkel zu erhalten auf das, was Sie lesen möchten. Durch das nochmalige Drücken der  Taste kehren Sie zum nahen Fokus zurück.


Stabilitätsfuß

Der MagniLink Visus verfügt über einen ausklappbaren Fuß, der sich um die Linse auf der Unterseite befindet. Klappen Sie ihn einfach aus, um die optimale Distanz zum Ausschnitt den Sie lesen zu erhalten. Klappen Sie ihn wieder ein, wenn er nicht benutzt wird.


Bild einfrieren

Das MagniLink Visus bietet die Möglichkeit, das Bild einzufrieren. Dies kann nützlich sein für schwer erreichbare Texte oder zum Beispiel, um eine Telefonnummer auf das Telefon schriftlich zu übertragen.





Drücken Sie die  Taste (G) und das Bild wird eingefroren; Drücken Sie sie noch einmal um zum Live Bild zurückzukehren. Das eingefrorene Bild ist nicht gespeichert und kann nicht vom Gerät übertragen werden.


Helligkeit

Um das Lesen von beleuchteten Gegenständen zu erleichtern, wie Handys oder Computerbildschirmen, kann das Licht ausgeschaltet werden. Drücken und halten Sie  Taste für 3 Sekunden um die LEDs vollständig auszuschalten. Drücken Sie die Taste noch einmal um die Beleuchtung wieder einzuschalten oder schalten Sie das Gerät aus und an.


Zwischen den Falschfarben wechseln

Sie können aus einer Zahl von Falschfarben wählen, wenn Sie möchten. Sie müssen dazu erst den Falschfarbenmodus aktivieren. Drücken Sie und halten Sie die  Taste für 3 Sekunden um durch die Optionen zu navigieren. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, drücken Sie noch einmal die  Taste um die Einstellung zu speichern.

Akkuanzeige

Drücken Sie und halten Sie die  Taste für 3 Sekunden um eine Anzeige auf dem Bildschirm zu sehen, die den derzeitigen Akkustand anzeigt. Wenn der Akku fast leer ist, wird die Anzeige automatisch in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Helligkeit des Displays ändern

Drücken Sie und halten Sie die  Taste für 3 Sekunden und das Display wird die Helligkeit ändern. Es gibt drei Einstellungen: 100%, 75% und 50%. Das Gerät wird die letzte Einstellung speichern und beim Anschalten wiederaufrufen.

Automatisches Ausschalten

Das MagniLink Visus reduziert den Stromverbrauch, wenn sich das Bild auf dem Display drei Sekunden nicht verändert hat. Das Display wird schwarz und das Licht schaltet sich aus. Wenn es eine Bewegung bemerkt, wird es automatisch wieder hochfahren. Wenn nach 8 Minuten keine Bewegung festgestellt wurde, schaltet sich das Gerät komplett aus und ein Tastendruck ist erforderlich, damit es wieder hochfährt.

Wenn der Akku leer ist, schaltet sich das MagniLink Visus aus, und lässt sich nicht wieder anschalten, bis es aufgeladen ist.

Alternatives Aufladen

Das MagniLink Visus kann von einem USB Anschluss aus aufgeladen werden oder mit vielen erhältlichen Aufladegeräten. Der Anschluss ist ein Industriestandardanschluss und alle Ladegeräte mit diesem Anschluss sind kompatibel, obwohl die Ladezeit variieren kann.

Pflegeinstruktionen und Warnungen

Wenn Sie das MagniLink Visus reinigen, benutzen Sie keine Seife, Lösungs- oder Schleifmittel. Legen Sie es nicht ins Wasser! Benutzen Sie das mitgelieferte Tuch um Fingerabdrücke etc. zu entfernen. Schmutz kann mit einem feuchten Lappen entfernt werden.

Öffnen Sie das MagniLink Visus nicht. Es befinden sich innen keine nutzerrelevanten Teile.

Die LED Leuchten des MagniLink Visus sind sehr intensiv. Schauen Sie nicht für längere Zeit in die LEDs.

Am Produktlebensende sollte das Crystal recycelt werden. Führen Sie es nicht einer Verbrennung zu.

Technische Daten

| MagniLink Visus 3,4 (MLVISUS3,4) | |
|---|---|
| Netzspannung | 100V – 240Vac 50/60Hz mit einem mitgelieferten Adapter |
| Gerätespannung | 5V dc, micro-USB Anschluss |
| Display | 3.4"-Diagonal AMOLED 16:9 |
| Funktionstemperatur | 0°C to 45°C |
| Ladezeit | 3 Stunden mit dem mitgelieferten Ladegerät |
| Benutzungszeit <i>Abhängig von der Art und Weise der Benutzung und des Gegenstandes</i> | Von 2 Stunden in Echtfarben bis zu 4 Stunden in Falschfarben. |
| Gewicht | 168g |
| Vergrößerung (Nähe-) (Ferneinstellung) | 2.8X, 4.5X und 5.5X 1.3x, 2x und 2.5x |

Die Spezifikationen sind vorläufig und können variieren.

Declaration of Conformity

We, Ash Technologies Ltd., declare under our sole responsibility that the products MagniLink Visus 3.4 and MagniLink Visus 4.3 of the brand LVI (Low Vision International), to which this declaration relates, are in conformity with the following standards or other normative documents:

EN55022: 2007

EN55024: 2008

EN61000-3-2: 2006

EN61000-3-3: 2008 and A1:2001 to EN61000-3-3:2008

Equipment classification: Class B

EN62471:2008 Classification: Risk Group 1 – (Low Risk)

following the provisions of EMC directive 2004/108/EC.

Alan Johnston

Ash Technologies Ltd, Naas, Ireland.

6 October 2011

