

Téléagrandisseur

## MagniLink Vision Basic HD



# MagniLink Vision Basic HD

**MagniLink Vision Basic HD** est un téléagrandisseur qui met à disposition aux personnes souffrant de déficience visuelle les fonctions de base, à un prix intéressant. MagniLink Vision Basic HD est un téléagrandisseur moderne, polyvalent qui allie à la fois ergonomie et aisance d'utilisation.

## Plug & play

Branchez MagniLink Vision Basic HD à une prise de courant, tournez le bouton de mise en marche et votre téléagrandisseur est prêt à être utilisé.

## Tableau intuitive

MagniLink Vision Basic HD est très simple à utiliser, ce qui le rend très populaire auprès des personnes âgées.

Les boutons de commande sont tactiles et positionnés directement sur le moniteur LVI intégré pour apporter une meilleure ergonomie d'utilisation. Le moniteur a été spécialement développé pour les personnes souffrant d'une déficience visuelle, avec une luminosité, un contraste et une reproduction des couleurs de haute qualité. La surface du moniteur est mate pour éviter les reflets. Le moniteur est disponible en deux tailles différentes : 18,5" et 23".


## Table de lecture stable

La table de lecture de haute qualité inclut des freins de friction. Ces freins peuvent être employés pour apporter une résistance plus élevée lorsque la table de lecture est déplacée latéralement ou en avant/en arrière. Ils peuvent également servir à verrouiller la table de lecture pendant le transport.

## Qualité d'image et design

La caméra de lecture offre une image stable, sans scintillement avec un contraste élevé et des couleurs lumineuses.

L'ergonomie de MagniLink Vision Basic HD a été spécialement étudiée pour apporter un meilleur confort et une aisance d'utilisation optimale. MagniLink Vision Basic HD est la version simplifiée de MagniLink Vision qui fut récompensé par le prestigieux prix Red Dot Design Award.

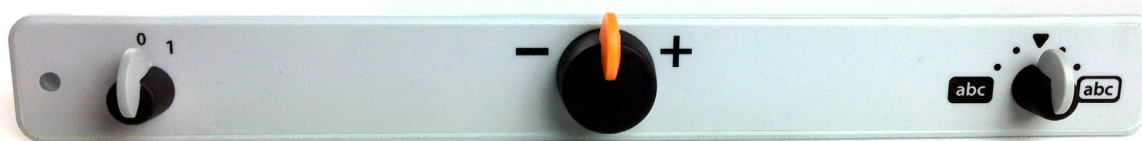

Le tableau de commande, composé uniquement de trois touches, est très simple à utiliser.

## Caractéristiques & avantages

- La qualité à un prix abordable
- Panneau de commande à 3 boutons, intuitif et prêt à fonctionner
- Moniteur intégré, spécialement développé par LVI et parfaitement adapté aux personnes souffrant de déficience visuelle
- Table de lecture stable et robuste
- Image de haute qualité (HD), stable et sans scintillement
- Lampes LED modernes, pour un éclairage uniforme sur toute la surface de la table de lecture
- Design ergonomique



## MagniLink Vision range

MagniLink Vision Basic HD est le modèle d'entrée de gamme de la famille des téléagrandisseurs modulaires MagniLink Vision. La série Premium offre des fonctions supplémentaires, comme la caméra Full HD, les raccordements aux ordinateurs, la caméra à distance ou la fonction "Text-To-Speech" (TTS) - processus de conversion OCR.

MagniLink Vision Basic HD est livrable aussi à un prix plus favorable, muni d'une caméra SD plus simple. Faites plus ample connaissance – appelez LVI.

## Caractéristiques techniques

<b>Modèle</b>	MagniLink Vision Basic HD	
<b>Code produit</b>		
MLV-BASIC-HD-19	MagniLink Vision Basic HD avec le moniteur de 18,5"	
MLV-BASIC-HD-23	MagniLink Vision Basic HD avec le moniteur de 23"	
<b>Agrandissement</b>	MLVBASIC-HD19	1,7 - 60x
	MLVBASIC-HD23	2,0 - 60x
<b>Poids</b>	MLVBASIC-HD19	11,8 kg
	MLVBASIC-HD23	13,5 kg
<b>Dimensions</b>	420 x 470 x 570 mm (LxPxH)	
<b>Dimensions de la table de lecture</b>	420 x 300 mm (LxP)	

Livrable aussi avec caméra SD (MLV-BASIC-SD-19 et MLV-BASIC-SD-23).

La société LVI Low Vision International est reconnue comme étant l'un des plus grands fabricants d'assistance à la basse vision. Sa mission consiste à faciliter la vie quotidienne des personnes souffrant de déficiences visuelles.

Nous sommes certifiés ISO 14001 et 9001.



### Distributeur local

LVI Low Vision International GmbH  
Hinterbrunnenstrasse 1  
8312 Winterberg  
Tel: 052 202 96 16  
Fax: 052 202 96 15  
E-mail: info@lvi.ch

[WWW.LVI.CH](http://WWW.LVI.CH)



LVI Low Vision International  
Verkstadsgatan 5,  
352 46 Växjö, SWEDEN  
Tel: +46 (0)470 72 77 00  
Fax: +46 (0)470 72 77 25  
E-mail: info@lvi.se

[WWW.LVI.SE](http://WWW.LVI.SE)

MLV BASIC 160215